


# Instructions de remplacement de l'attache centrale

## Éléments nécessaires au remplacement de l'attache centrale :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1 Attache centrale n° 2023 | 1 clé hexagonale n° 9906 (ou clé d'allen 1/16") |
| 1 ressort d'attache n°     | 1 clé hexagonale n° 9904 (ou clé d'allen 3/32") |


### Retrait de l'attache centrale :

1

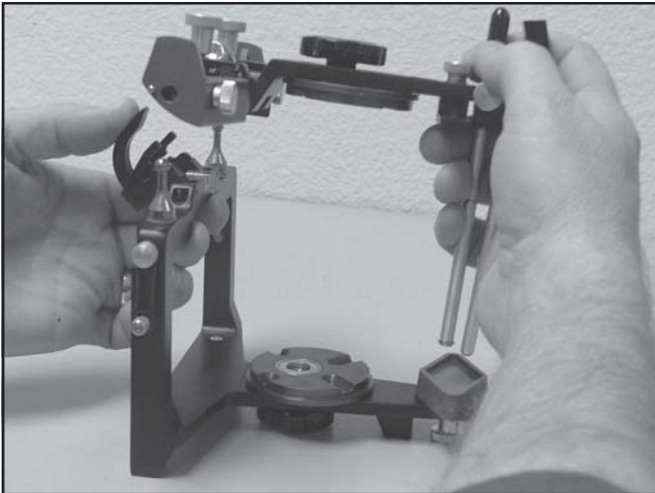


Dévissez les vis moletées des prothèses bleues pour en enlever les Dyna-Links. Relâchez l'attache centrale et ôtez le cadre de l'articulateur supérieur du cadre inférieur.

2

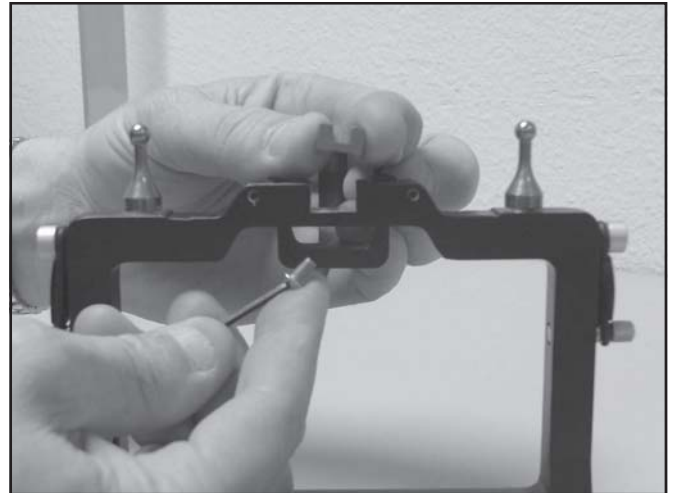


Tout en maintenant l'articulateur, utilisez le clé hexagonale pour dévisser et ôter la vis du Canal central. Ôtez le Canal central.

3

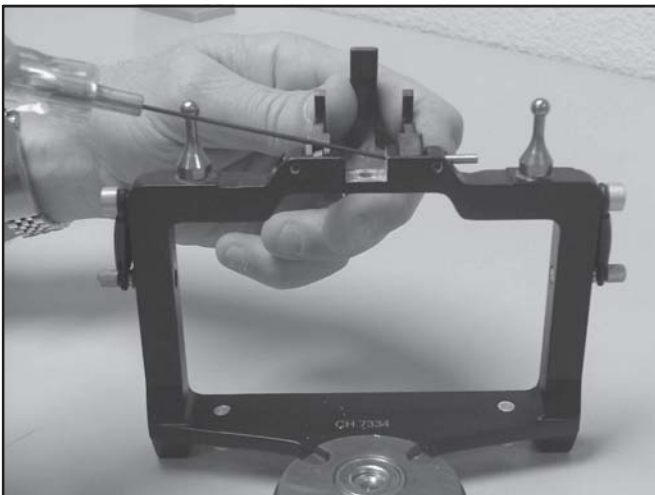

A l'aide d'une clé hexagonale 1/16", dévissez les vis de réglage des broches de charnière de l'attache centrale. Poussez les broches de charnière de l'attache centrale à l'extérieur en passant par l'ouverture du canal central.


4

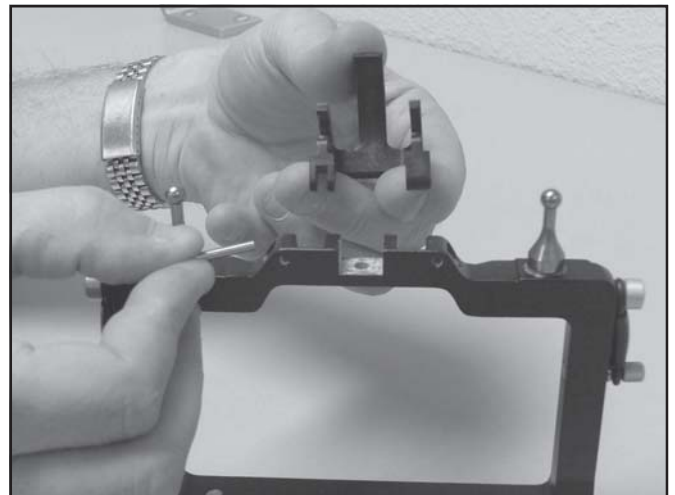

Ôtez l'attache centrale.  
Remarque : Faites attention à ne pas relâcher le ressort de l'attache centrale.


## Installation de l'attache centrale :

1

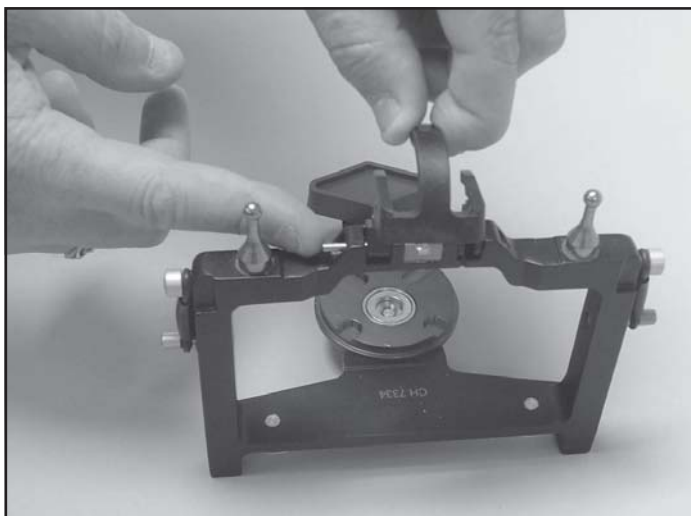


Placez la nouvelle attache centrale dans le cadre inférieur de l'articulateur. Poussez sur la broche de charnière située de l'autre côté jusqu'à ce qu'elle pénètre dans l'attache centrale.

2

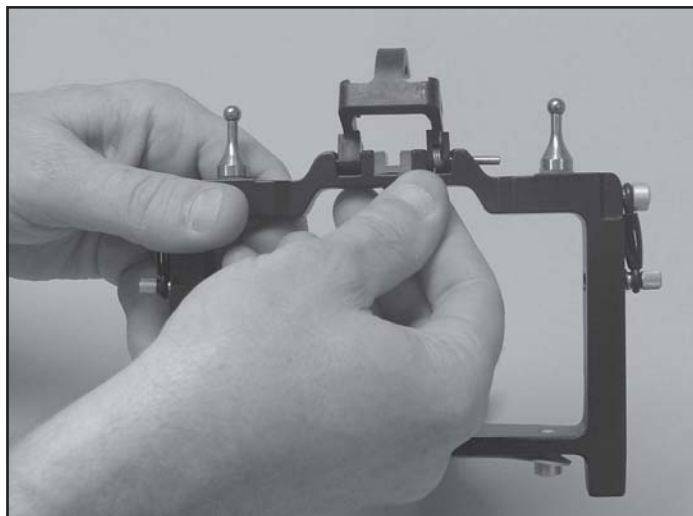


Placez et poussez en position le ressort de l'attache centrale, puis poussez la broche de charnière.

3

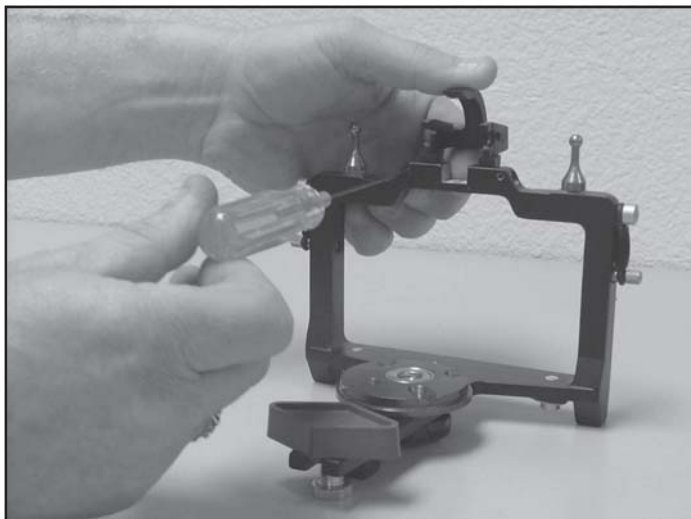

Resserrez les vis de fixation de la broche de charnière de l'attache centrale.

4

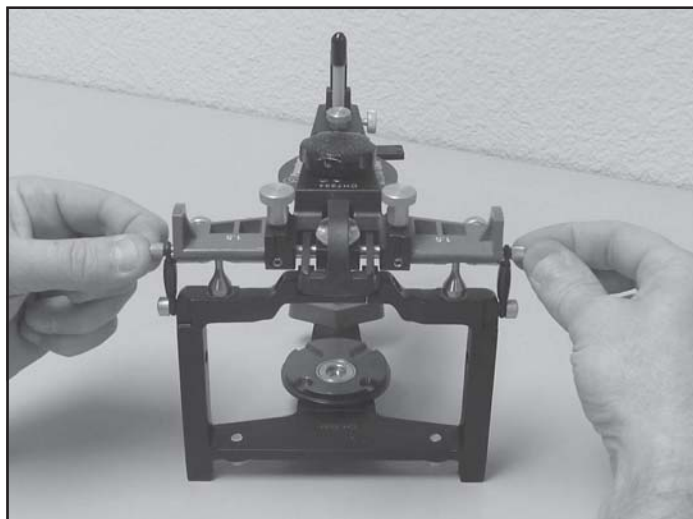

Remplacez le cadre supérieur de l'articulateur et ajustez le canal central si nécessaire.