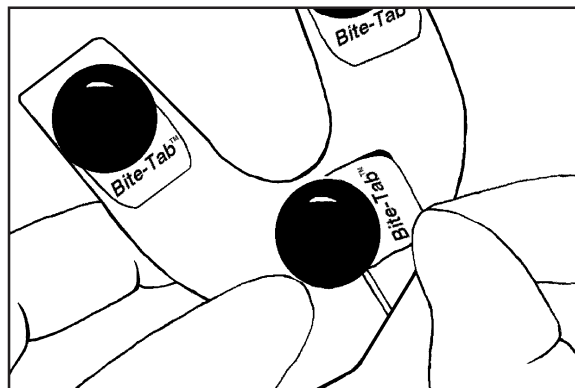
 Corporación Panadent  
 580 S. Rancho Avenue • Colton, California 92324, USA  
 Tel: (909) 783-1841


Estas instrucciones se aplican a los artículos:  
 REF 4027, 4028, 4037, 4038, 4131

Colocar el material para el registro de mordida, cera, compuesto calentado o presionar una lengüeta de mordida Bite-Tab en cada una de las siguientes posiciones: molar izquierdo, molar derecho e incisivo en las superficies **superior** e **inferior** (6 lengüetas) en una horquilla limpia y seca.



**1**

Colocar el extremo intraoral de la horquilla en un recipiente flexible de mezclado conteniendo agua caliente (40°) por aproximadamente 30 segundos a un minuto para ablandar el compuesto de los discos *Bite-Tab*. (El compuesto blando se puede moldear con los dedos antes de colocarlo en la boca para un mejor contacto con los dientes si es necesario).


No colocar la horquilla en baño de agua ya que los residuos de cera y aceites en el agua pueden evitar que las lengüetas *Bite-Tabs* se adhieran a la horquilla.

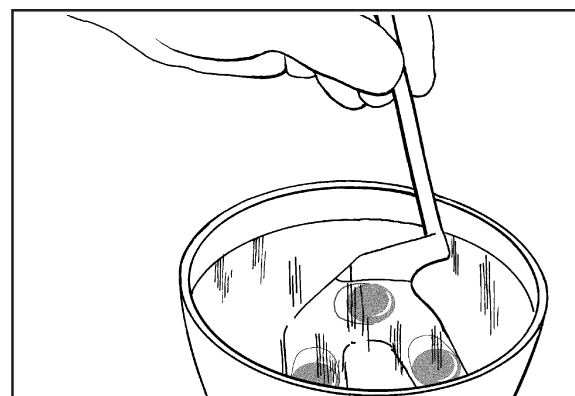
**2**


Colocar la horquilla de mordida en la boca del paciente con el tallo hacia el lado derecho del paciente y apuntando hacia afuera. Colocar la horquilla con la marca de la línea central alineada con el plano sagital central de la cabeza. Pedir al paciente que cierre la boca con ligera presión sobre el compuesto blando y abrir la boca inmediatamente antes que los dientes hagan contacto con el metal de la horquilla. Para pacientes sin dientes, usar una horquilla completa para marcar la mordida del paciente.

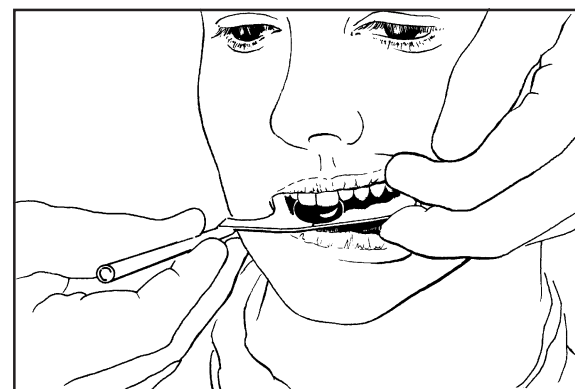
**3**

Remover la horquilla de la boca del paciente y endurecer el compuesto de los discos con agua fría de la llave o colocar la horquilla en un recipiente de mezclado conteniendo agua fría para endurecer el compuesto.

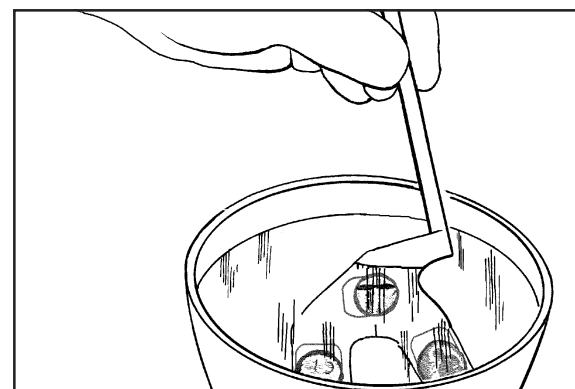

**4**

5

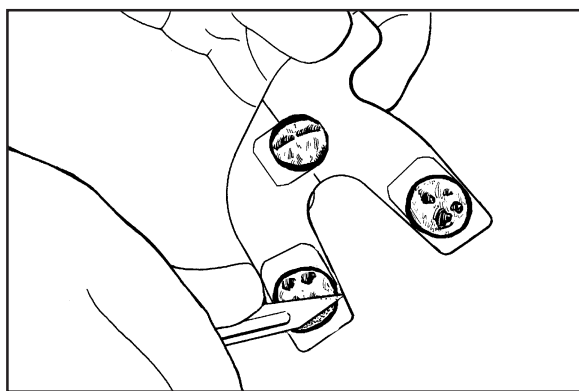

Recortar el exceso del compuesto dejando no más de 1 mm de profundidad de las marcas de las puntas de las cúspides y de las orillas de los incisivos. También recortar cualquier área edentular distal dejando solamente un área pequeña del borde denso de la encía para apoyar la horquilla en la boca. Remover todas las partículas sueltas del compuesto con un cepillo de dientes suave o con aire comprimido.

6

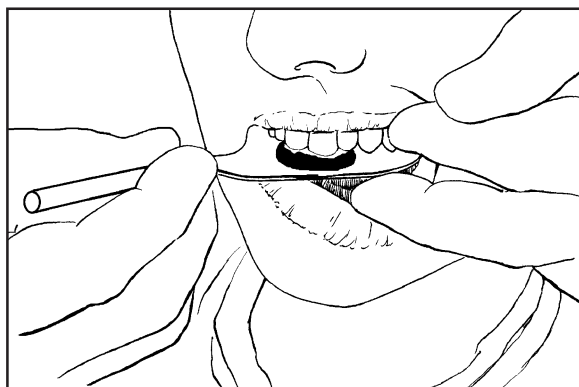

Colocar la horquilla con el registro en los dientes maxilares del paciente y hacer que el paciente cierre los dientes maxilares firmemente en las marcas originales usando la quijada inferior para apoyar la horquilla.