


■ Panadent Corporation  
580 S. Rancho Avenue • Colton, California 92324, USA  
Tel: (909) 783-1841

Le seguenti istruzioni sono valide per i seguenti prodotti:  
REF 4027, 4028, 4037, 4038, 4131


Collocare il materiale per la registrazione del morso, la cera, il composto riscaldato o una compressa *Bite-Tab* su ognuna delle seguenti aree: molare sinistro, molare destro e incisivi. Collocare il materiale scelto sulle superfici **superiore** e **inferiore** (in tutto, sei volte) di una forchetta pulita e asciutta.

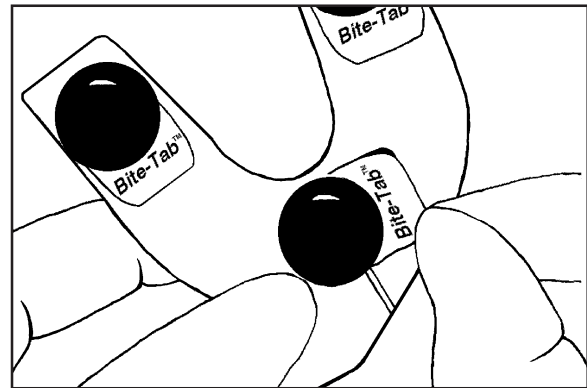

1


Collocare il lato della forchetta da inserire nella bocca del paziente all'interno di un contenitore pieno di acqua dolce calda (125°F / 40°C) per mezzo minuto/un minuto per ammorbidire i dischi *Bite-Tab*. (Se necessario, il composto ammorbidito può essere modellato manualmente prima di essere inserito nella bocca del paziente. In questo modo è possibile assicurare un contatto migliore).

Non inserire la forchetta in bagni termostatici: i residui di cera e gli oli potrebbero impedire la corretta aderenza dei *Bite-Tabs* alla forchetta.--

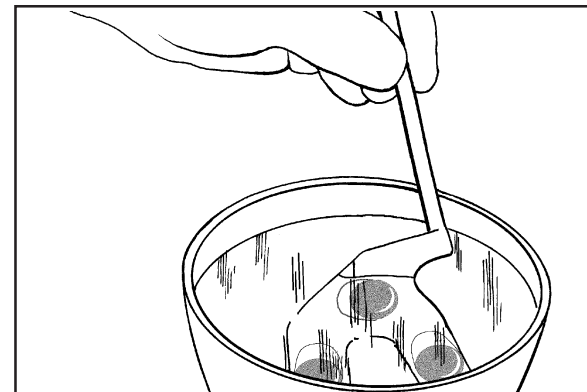


2

Collocare la forchetta nella bocca del paziente. Lo stelo deve trovarsi sul lato destro del paziente, e puntare in avanti. Posizionare la forchetta in modo che il segno indicante la linea mediana sia allineato con il piano medio-sagittale della testa del paziente. Chiedere al paziente di stringere leggermente i denti affondandoli nel composto e di aprire la bocca prima che essi entrino in contatto con il metallo della forchetta. Per i pazienti edentuli, utilizzare una forchetta per dentatura completa per rilevare il morso della bocca del paziente.

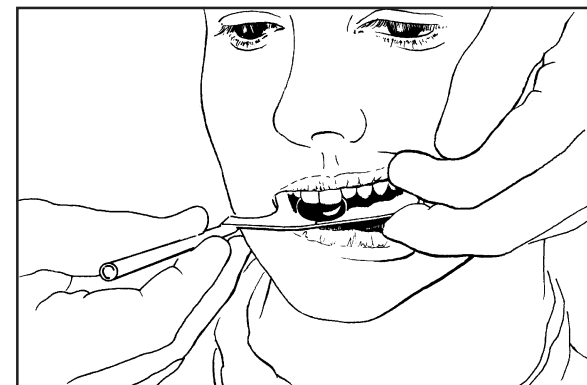

3


Rimuovere la forchetta dalla bocca del paziente e far indurire i dischi sotto acqua corrente fredda o collocando la forchetta in un contenitore riempito di acqua fredda.

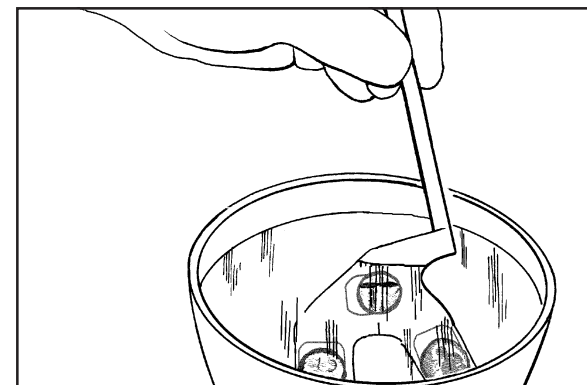

4


# Istruzioni della forchetta

5

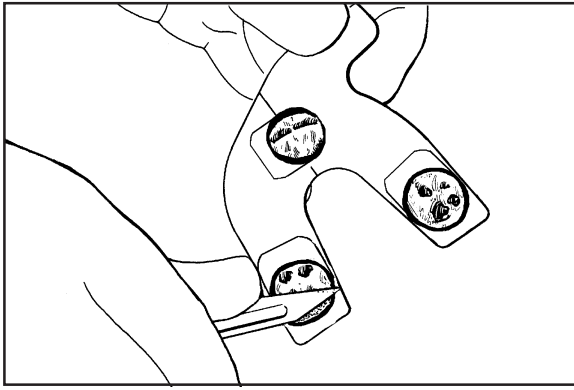

Rimuovere il composto in eccesso, assicurandosi che le impronte delle punte dei denti e dei margini incisali non siano più profonde di 1 mm. Eliminare anche qualsiasi area edentula delle estensioni distali, assicurandosi di lasciare solo le aree con i calchi delle creste dei denti e una parte del calco della gengiva, per assicurare il sostegno della forchetta all'interno della bocca. Rimuovere tutte le parti di composto residue e in eccesso con uno spazzolino dalla punta morbida o con aria compressa.

6

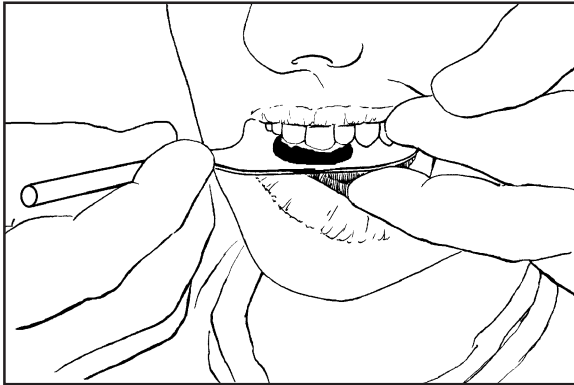

Collocare la forchetta per la registrazione del morso sui denti superiori del paziente e chiedergli di serrare la mandibola correttamente, facendo sì che la mandibola sostenga la forchetta.